

Bijwerken Labcodes

*Nieuwe versie Labcodetabel
inlezen in MIRA*



HET SOFTWAREPAKKET VOOR DE ZORG



CGM Nederland, mei 2012

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	i
Inleiding	1
1 Bijwerken labcodes	1
1.1 Resultaat batch-proces bekijken	2

Inleiding

Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel uit. Zodra de nieuwe tabel beschikbaar komt, kunt u die inlezen in MIRA, waarna u de codes kunt gebruiken in onderzoeken en protocollen.

Op het moment dat een nieuwe versie van de labcodetabel beschikbaar is, wordt deze samen met de tax-mutaties uitgeleverd.

Hoofdstuk 1 Bijwerken labcodes beschrijft hoe u de labcodes kunt bijwerken.

Opmerkingen

Het bijwerken geschiedt per database. Als u met meerdere praktijken in een cluster samenwerkt (en er dus maar één database is voor alle aangesloten praktijken), dan hoeft het bijwerken slechts één keer te worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door een databasebeheerder).


Het kan echter geen kwaad het bijwerken van de labcodes meerdere keren na elkaar uit te voeren. Eenmaal bijgewerkt, worden er geen wijzigingen meer aangebracht, totdat een nieuwe versie van de labcodetabel verwerkt wordt.

1 Bijwerken labcodes

Het bijwerken van de labcodetabel verloopt als volgt:

1. Klik in het hoofdmenu op **Onderzoeken**.
2. Klik in het submenu op **Labcodes**.

De pagina **Labcodes** wordt geopend. Bovenaan de pagina staat welke versie van de tabel is geïnstalleerd (zie Figuur 1-1).

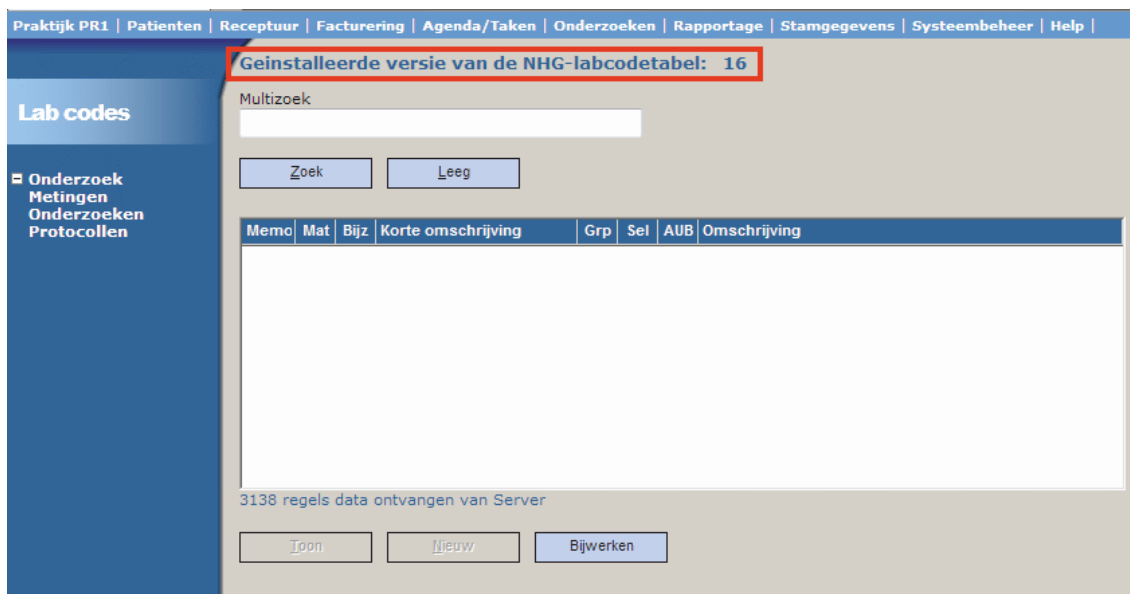

Figuur 1-1

3. Klik op de knop **Bijwerken**

Op het scherm verschijnt de vraag of u de labcodetabel wilt bijwerken (zie Figuur 1-2). Hier staat ook vermeld naar welke versie de tabel wordt bijgewerkt.



Figuur 1-2

U kunt kiezen tussen het daadwerkelijk bijwerken van de tabel of het vooraf bekijken van de wijzigingen, voordat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd.


Als u eerst het resultaat wilt bekijken, zonder dat de tabel daadwerkelijk wordt bijgewerkt, dan moet u op de knop **Rapportage** klikken. Het programma, dat de mutaties verwerkt, wordt gestart en voert alle benodigde bewerkingen uit, *behalve het opslaan in de database*. Na afloop is niets gewijzigd, maar u kunt wel het resultaat van de verwerking bekijken.

Als u de labcodetabel daadwerkelijk wilt bijwerken, moet u op de knop **Wijzigen** klikken.

1.1 Resultaat batch-proces bekijken

Nadat u op één van beide knoppen heeft geklikt, wordt een batch-proces gestart. Het resultaat daarvan kunt u als volgt bekijken:

4. Klik op de knop **OK** om de melding over het batchproces te sluiten.
5. Klik in het hoofdmenu op **Systeembeheer**.
6. Klik in het submenu op **Batch-processen**.
*De pagina **Batchprocessen** wordt geopend.*
7. Klik op de keuzelijst **Functie** en klik in de lijst op **Labcodes bijwerken**.
Zie Figuur 1-3.

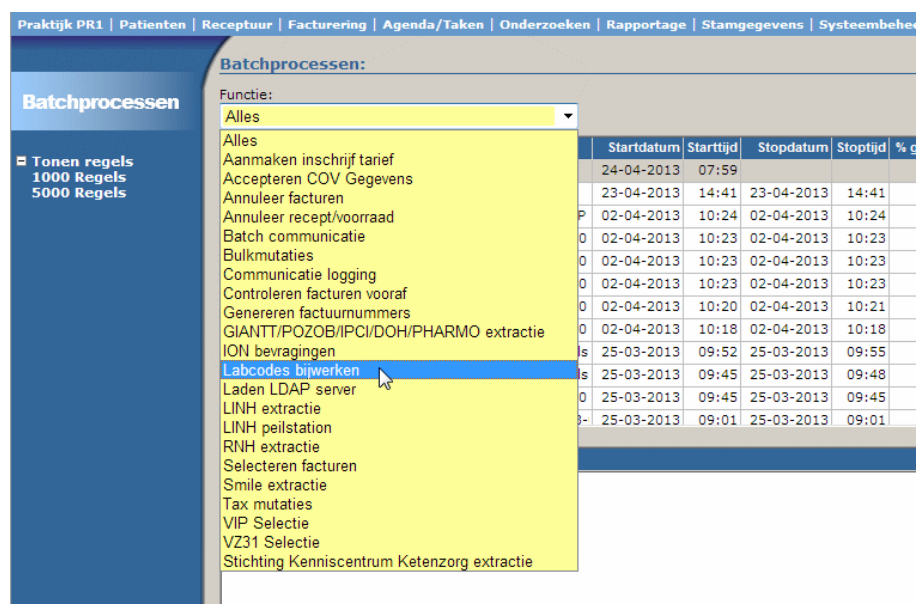

Figuur 1-3

In het bovenste overzicht worden alle batchprocessen getoond, die betrekking hebben op het bijwerken van de labcodes, waarbij het meest recente proces bovenaan staat. Dit batchproces is automatisch geselecteerd.

Het onderste overzicht toont alle wijzigingen, die tijdens het geselecteerde batchproces in de labcodetabel zijn aangebracht. De diverse regels kunt u bekijken door het overzicht te verschuiven met behulp van de schuifbalk. *Figuur 1-4* toont een voorbeeld van een deel van het overzicht met informatie over de wijzigingen.

Volgnr	Datum	Tijd	Omschrijving
210	23-04-2013	14:41	Labcode : 3285 (Strongyloides faeces) is toegevoegd met Memocode, Materiaal en Bijzonderheid (STRI - DF - MM)
211	23-04-2013	14:41	Labcode : 3286 (controlebeleid hartfalen) is toegevoegd met Memocode, Materiaal en Bijzonderheid (HFCB - KZ -)
212	23-04-2013	14:41	Labcode : 3287 (reumatoïde artritis (comorbiditeit)) is toegevoegd met Memocode, Materiaal en Bijzonderheid (RA - LQ -)
213	23-04-2013	14:41	Voor labcode 1775 (controlebeleid DM2) zijn NHG-antwoorden vastgelegd of gewijzigd! De NHG Mira-antwoorden zijn: 1* - 1x per twee jaar > 4x per jaar 2* - 1x per jaar 4x per jaar 3* - 2x per jaar 2-3 x per jaar 4* - 3x per jaar 1x per jaar 5* - 4x per jaar overig 6* - elke 2 maanden geen geregelde zorg 7* - elke 6 weken 8* - elke maand 9* - overig 10* - geen geregelde zorg

331 regels data ontvangen van Server

Figuur 1-4

Op de regel met volgnummer 210 kunt u zien dat het NHG de labcode 3285 heeft toegevoegd. Op de regel met volgnummer 213 kunt u zien, dat de in Mira aanwezige antwoordcodes worden vervangen door de NHG-antwoordcodes. Voor het | teken staan de NHG-antwoordcodes en achter het | teken de eventueel aanwezige MIRA antwoordcodes.

Indien er achter het nummer in de kolom Omschrijving een asterisk (*) staat, betekent dit dat de omschrijving gewijzigd of toegevoegd is, omdat deze eerder niet bestond.

Vanaf de website van het NHG (<http://www.nhg.org/>) kunt u een programma (CodeViewer) downloaden, waarmee u -na installatie- de labcodetabel kunt bekijken. CCM biedt geen ondersteuning bij het downloaden en installeren van dit programma. Voor ondersteuning dient u zich te wenden tot het NHG.
